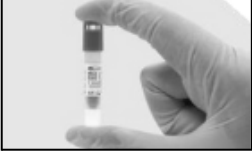


Anexo 01. Guia Rápido de uso do Indicador Biológico SISPACK SP220 e Incubadora IC10-20FR

A incubadora deve ser previamente conectada à rede elétrica para que aqueça adequadamente.	
Certifique-se de que a luz indicadora de temperatura (60°C) esteja piscando, o que indica que a incubadora está aquecendo. Aguarde até que a luz indicadora de temperatura pare de piscar e permaneça acesa, indicando que a temperatura ideal de funcionamento foi alcançada.	
Certifique-se de que o tempo de 3 (três) horas está selecionado tanto para a porção esquerda (posições de incubação 1 a 6), quanto para a porção direita (posições de incubação 7 a 12).	
Identifique os IBs (nº da autoclave, nº da carga, data do processo) e mantenha o IB com a tampa levantada; Coloque o IB dentro do pacote desafio; Posicione o Pacote Desafio próximo ao dreno da autoclave; Separe um IB de mesmo lote para ser o IB de Controle Positivo (NÃO ESTERILIZAR).	
Após o ciclo de esterilização, abra a autoclave e deixe a porta entreaberta por 10 (dez) minutos. Retire o Pacote Desafio da autoclave; Pressione a tampa do IB autoclavado e faça o mesmo com o IB de Controle Positivo.	
Verifique a mudança de cor do indicador químico na etiqueta do IB autoclavado (a faixa rosa deve escurecer após o processo de esterilização). Verificar a faixa rosa no IB de Controle Positivo (A faixa deste IB não pode mudar de cor, já que não é submetido ao processo de esterilização). Quebre o IB autoclavado e o IB de Controle Positivo no quebra ampolas da incubadora.	
Agite os indicadores vigorosamente de forma ascendente e descendente, até que o líquido arroxeadado (meio de cultura) molhe totalmente o algodão localizado no fundo da ampola (portador de esporos).	
Confira novamente o tempo de incubação (3 horas) e a temperatura (60°C). Insira os IBs nas posições de incubação. A incubação será iniciada automaticamente (as luzes de posição verde e vermelha começarão a piscar) Aguarde o resultado, que será impresso automaticamente.	
Luz VERDE estável (resultado negativo): Este resultado é esperado para todos os indicadores submetidos ao processo de esterilização e significa que a esterilização foi bem sucedida. Luz VERMELHA estável (resultado positivo): Este resultado SEMPRE deve ocorrer para o IB de Controle Positivo. Caso este resultado seja obtido para um IB autoclavado, é um indicativo de que alguma etapa do processo de esterilização falhou, reveja todo o processo.	
Registre os resultados obtidos no Livro Controle (Modelo Anexo ao POP - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR). Descarte TODOS os IBs na Caixa de Perfurocortantes.	