

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Aprovação 24/02/2025	Revisão 24/02/2027	Versão nº 01	Rotina SES.DAS nº 13	Páginas 18
Nome do Procedimento: Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR.				
Gerência(s) Responsáveis pelos Serviços Executantes: Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal.				
Serviço(s) Responsáveis Pela Execução do POP: Unidades Básicas de Saúde da Família, UPAs, PA, Serviços Especiais e Laboratório Municipal.				
Cargos Responsáveis Pela Execução das Tarefas: Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros, Técnicos em Análises Clínicas, Analistas Clínicos, Auxiliares de Saúde Bucal e demais profissionais envolvidos no processo de esterilização.				
Objetivo(s): Orientar os profissionais sobre a rotina de monitoramento do processo de esterilização com o indicador biológico SISPACK SP220 em conjunto com a Incubadora IC10-20FR.				
Recursos necessários: → Autoclave; → Incubadora de Indicadores Biológicos; → Indicador Biológico Autoclavado (Esterilizado); → Indicador Biológico de Controle Positivo (Não Esterilizado); → Materiais prontos para esterilização.				

DEFINIÇÃO

Este procedimento trata-se de um documento complementar ao Manual da Incubadora de Indicadores Biológicos de modelo IC10-20FR (Manual disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6) e ao Manual de Biossegurança (Disponível no Processo SEI nº 23.0.177095-2).

Especificamente, trata de processos internos de trabalho que devem ser seguidos para o sucesso do monitoramento do processo de esterilização, juntamente com as recomendações do fornecedor.

As etapas descritas neste POP são dependentes das demais etapas descritas nos manuais citados anteriormente.

CONCEITOS


Indicador Biológico Novo (IB Novo): Trata-se de indicador biológico não submetido ao processo de esterilização em autoclave nem ao processo de incubação na incubadora.

Indicador Biológico Autoclavado (IB Autoclavado): Trata-se de indicador biológico submetido ao processo de esterilização em autoclave.

Indicador Biológico de Controle Positivo (IB de Controle Positivo): Trata-se de indicador biológico não submetido ao processo de esterilização em autoclave. Deverá ser incubado juntamente com o IB Autoclavado, diariamente. O IB de Controle Positivo garante que o tempo e temperatura corretos de incubação foram alcançados, que a viabilidade dos esporos não foi alterada devido a condições de armazenamento inadequadas, que o meio de cultura é capaz de proporcionar o desenvolvimento dos esporos bacterianos e gerar fluorescência e que a incubadora está funcionando corretamente.



Passo 01. Conhecer a Incubadora de Indicadores Biológicos IC10-20FR:

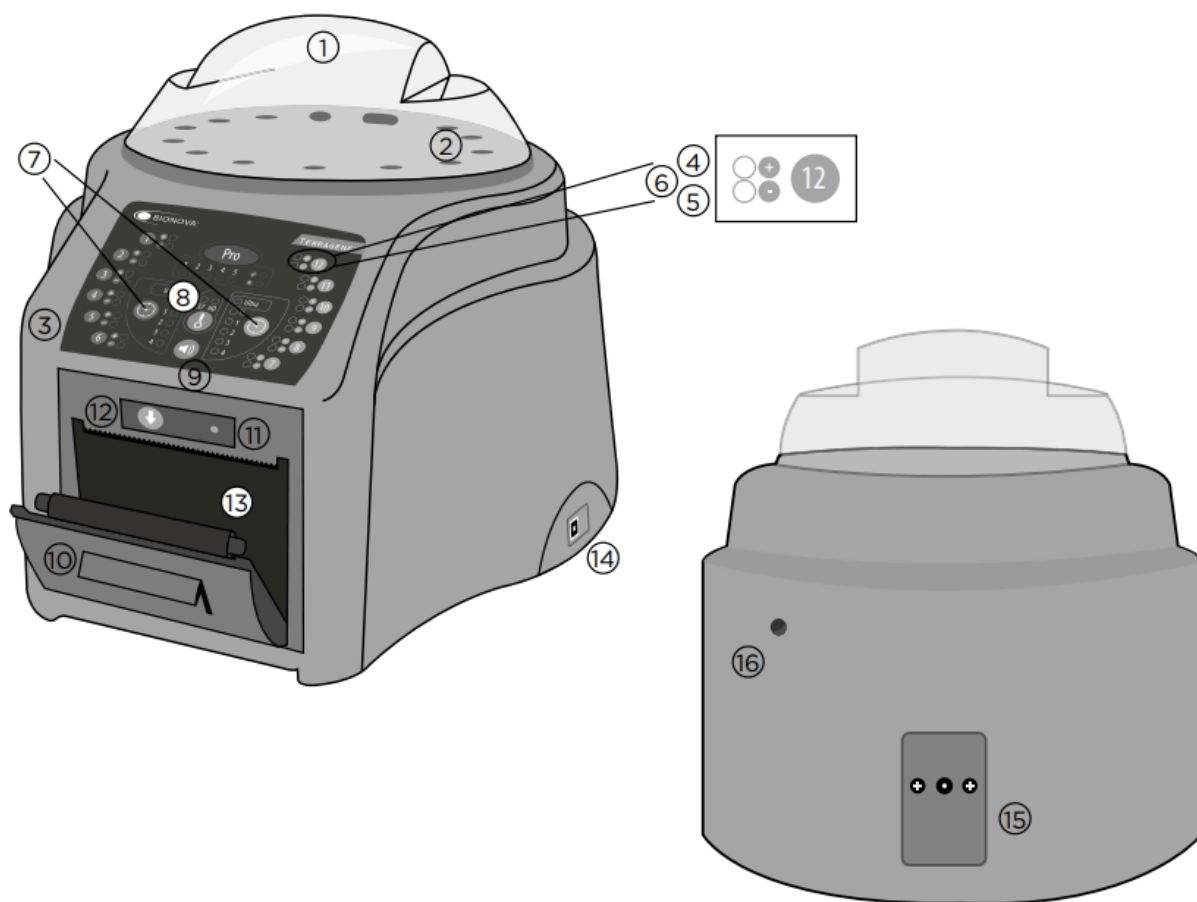

Referências:

1. Capa Protetora;
2. Área de Incubação para 12 indicadores biológicos e 1 caneta de proteína. Quebra ampolas;
3. Painel de Controle;
4. Luz Vermelha / Indicador Positivo;
5. Luz Verde / Indicador Negativo;
6. Número de Posição de Incubação
7. Botões de Seleção do Tempo de Incubação;
8. Botão de Seleção da Temperatura de Incubação / Tempo Restante;
9. Botão de Cancelamento do Alarme / Impressão dos últimos 12 resultados de incubação;
10. Impressora Térmica;
11. Luz Indicadora de Papel da Impressora;
12. Botão de Tração de Papel;
13. Cavidade do Papel;
14. Porta USB;
15. Conexão 12V;
16. Orifício para Controle de Temperatura Externa

Passo 02. Certificar-se de que a incubadora encontra-se em uma superfície firme, livre de vibrações, longe da luz solar direta, de correntes de ar quente ou frio, de substâncias químicas, corrosivas ou inflamáveis e que a mesma se encontra a pelo menos 10cm de distância de qualquer parede ou quaisquer outras barreiras físicas.

Atenção: A incubadora deverá permanecer ligada à rede elétrica **somente durante a incubação das ampolas**, sendo desligada ao final da incubação de forma que fique desligada sempre que a unidade de saúde esteja fechada ou a incubadora não esteja em uso.

Atenção: Caso seja necessário ajustar a data, hora ou idioma da incubadora, consulte o Manual da Incubadora IC1020FR, páginas 46 a 49 (Disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6).

Passo 03. Diariamente, no primeiro ciclo de esterilização, realizar o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico. Na própria etiqueta da ampola, identificar os IB Novos com o nome da autoclave em que serão alocados, bem como o indicador que será utilizado como IB de Controle Positivo. Certificar-se de que estejam dentro do prazo de validade e que pertençam ao mesmo lote.

Nos casos em que houver mais de uma autoclave na unidade de saúde, utilizar um IB em cada autoclave e apenas um IB de Controle Positivo para todas as autoclaves. Veja o exemplo:



Fonte: NGA

Da mesma forma, nos casos das autoclaves que demandam mais de um indicador biológico no ciclo de esterilização, apenas um IB de Controle Positivo é necessário. Veja o exemplo:



Fonte: NGA

Atenção: Dispensa-se o monitoramento do processo de esterilização nos dias em que, em razão da demanda, não houver esterilização de materiais.

Passo 04. Ligar a incubadora no início do ciclo de esterilização da autoclave.



Passo 05. Verificar a configuração de **temperatura** da incubadora. O atual indicador biológico (SISPACK SP220) disponibilizado pelo CAME requer uma temperatura de 60°C (sessenta graus celsius).

Passo 5.1. Caso seja necessário alterar a temperatura de incubação, pressionar e segurar o botão de seleção de temperatura (🌡️) por 3 (três) segundos para entrar no modo de seleção de temperatura;

Passo 5.2. Pressionar o botão novamente para selecionar a temperatura de 60°C. Após 4 (quatro) segundos, a modificação de temperatura será aceita automaticamente.

Passo 06. Verificar a configuração de **tempo** da incubadora. O atual indicador biológico disponibilizado pelo CAME (SISPACK SP220) requer um tempo de incubação de 3 (três) horas.

Passo 6.1. Caso seja necessário alterar o tempo de incubação:

Pressionar o botão de seleção de tempo de incubação esquerdo  para selecionar o tempo de incubação das posições de incubação 1 a 6;


Pressionar o botão de seleção de tempo de incubação direito  para selecionar o tempo de incubação das posições de incubação 7 a 12.

Passo 07. A incubadora estará com a temperatura ideal para o funcionamento quando a luz indicativa estiver acesa continuamente.



Atenção: Não colocar um indicador biológico na incubadora antes que a temperatura de incubação esteja estável. A incubadora requer um tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos para atingir a temperatura adequada de funcionamento. Aguardar até que a luz indicadora de temperatura pare de piscar.

Após atingir a temperatura adequada de funcionamento, um teste automatizado único para verificar o status interno de cada posição será realizado (teste automático). O teste é realizado individualmente em cada posição de incubação, em sentido anti-horário iniciando na posição 01.

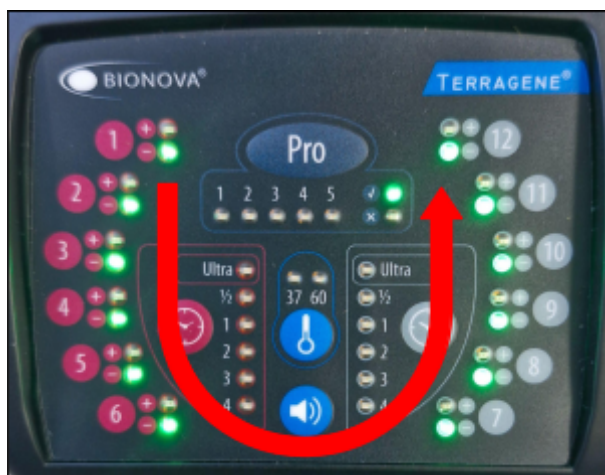

Uma vez que o teste for concluído para a posição, a luz indicadora de status da posição ficará verde para indicar que a posição pode ser usada para realizar leituras, ou ficará vermelha para indicar que ocorreu um erro, neste último caso entrar em contato com a fabricante da incubadora por meio dos telefones 011 2955-2222 (fixo), 011 98988-8760 (WhatsApp) ou 011 99251-8524 (WhatsApp).

Passo 08. Após o término do ciclo de esterilização da autoclave, iniciar a incubação dos indicadores biológicos.

Atenção: Aguardar pelo menos 10 minutos antes de retirar o IB da autoclave, sob risco de queimadura. Em hipótese alguma deixe de aguardar o resfriamento do Indicador Biológico Autoclavado.

Passo 8.1. Verificar a mudança de cor do indicador químico do IB (faixa localizada na etiqueta), que deverá escurecer após o ciclo de esterilização;



Passo 8.2. Após o resfriamento, fechar a tampa do IB Autoclavado e do IB de Controle Positivo, pressionando-as;

Passo 8.3. Quebrar a ampola de vidro interna do IB Autoclavado e do IB de Controle Positivo, utilizando o local indicado na incubadora (quebra ampolas).



Passo 8.4. Agitar vigorosamente o IB Autoclavado e o IB de Controle Positivo, de modo que o líquido arroxeadado (meio de cultura) molhe completamente o filtro contido no fundo do indicador (portador de esporos), como nas imagens a seguir:



Passo 8.5. Inserir o IB Autoclavado e o IB de Controle Positivo em suas posições de incubação. O processo de incubação começará automaticamente: o equipamento emitirá um sinal sonoro e as luzes indicadoras (verde e vermelha) referentes à posição começarão a piscar.



Se o leitor automático não iniciar uma leitura imediatamente após colocar um indicador em uma posição de incubação, consultar a seção **Solução de problemas** no Manual da Incubadora, página 52 (Disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6).

Passo 8.6. Fechar a tampa protetora.

Atenção: Não remover ou alterar o posicionamento dos indicadores depois que um processo de incubação for iniciado, caso contrário a leitura será cancelada e o indicador será inutilizado.

Atenção: Se, por qualquer motivo, o ciclo de incubação for interrompido antes do resultado, todos os indicadores em incubação deverão ser descartados, os materiais da carga deverão ser reembalados e submetidos a um novo ciclo de esterilização.

Jamais incubar novamente os indicadores biológicos que tiveram a incubação interrompida. Os resultados obtidos por meio destes indicadores biológicos não poderão ser considerados, em hipótese alguma.

Passo 8.7. Aguardar até que um resultado de leitura seja obtido, que poderá ser:

POSITIVO:

Quando um resultado positivo é detectado, a luz indicadora de status da posição ficará **vermelha**, um alarme sonoro será ativado e um tíquete será impresso.



Para o IB autoclavado, isso significa que o processo de esterilização falhou.

Um resultado positivo sempre deverá ocorrer para o IB de Controle Positivo, utilizado como parâmetro para validar o resultado do IB Autoclavado.

NEGATIVO:

Transcorrido o tempo de incubação previamente estipulado, não havendo positivação do indicador, o resultado é considerado negativo, então a luz indicadora de status da posição ficará **verde** e um tíquete será impresso.

Para o IB Autoclavado, isso indica que o processo de esterilização foi bem-sucedido.

O resultado negativo para o IB Autoclavado só é válido se um resultado positivo for obtido para o IB de Controle Positivo. Consultar a seção **Controle Positivo** no Manual da Incubadora, p. 44 e 45 (Disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6.)

CANCELADO:

Se, por qualquer motivo (queda de energia, alteração da posição de incubação, retirada de indicador por mais de 10 (dez) segundos da posição de incubação, etc), um resultado cancelado for obtido, um tíquete será impresso.

Nestes casos, os indicadores deverão ser descartados, os materiais da carga deverão ser reembalados e submetidos a um novo ciclo de esterilização.

Passo 8.8. A cada resultado de leitura (positivo, negativo ou cancelado), um tíquete será impresso. Destacar o tíquete puxando-o para cima. Eles serão semelhantes aos indicados a seguir:

```
.....
BIONOVA          IC10/20FR
      INCUBADORA DE
      LEITURA RÁPIDA
NUM. SÉRIE: XXXX XXX
TICKET #: 00000XX
PROGRAMA: XXH / XX°C
DATA: DD/MM/AA
INÍCIO: HH:MM
LEITURA: HH:MM
TUBO DE AMOSTRA: X
POSITIVO
.....
```

```
.....
BIONOVA          IC10/20FR
      INCUBADORA DE
      LEITURA RÁPIDA
NUM. SÉRIE: XXXX XXX
TICKET #: 00000XX
PROGRAMA: XXH / XX°C
DATA: DD/MM/AA
INÍCIO: HH:MM
LEITURA: HH:MM
TUBO DE AMOSTRA: X
NEGATIVO
.....
```

```
.....
BIONOVA          IC10/20FR
      INCUBADORA DE
      LEITURA RÁPIDA
NUM. SÉRIE: XXXX XXX
TICKET #: 00000XX
PROGRAMA: XXH / XX°C
DATA: DD/MM/AA
INÍCIO: HH:MM
LEITURA: HH:MM
TUBO DE AMOSTRA: X
CANCELADO
.....
```

A incubadora permite a reimpressão dos últimos 13 resultados. Para isso, basta pressionar o botão  por 5 segundos.



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS		
Resultado do IB Autoclavado	Resultado do IB de Controle Positivo	Resultado do Monitoramento da Esterilização com IB
POSITIVO	POSITIVO	REPROVADO
NEGATIVO	NEGATIVO	REPROVADO
POSITIVO	NEGATIVO	REPROVADO
CANCELADO	POSITIVO	REPROVADO
NEGATIVO	CANCELADO	REPROVADO
CANCELADO	CANCELADO	REPROVADO
NEGATIVO	POSITIVO	APROVADO

Fonte: NGA

Para mais informações, consultar a seção ***Interpretação dos resultados*** no Manual da Incubadora, página 45 (Disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6).

Atenção: Caso o Monitoramento do Processo de Esterilização com IB seja reprovado, consultar o **Anexo 04** “Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico”.

Atenção: A configuração do tempo de incubação define o limite de tempo máximo no qual a incubadora pode informar uma leitura de fluorescência (positiva ou negativa). No entanto, a incubadora pode detectar e informar um resultado positivo antes do limite de tempo selecionado.

Passo 09. Descartar os indicadores (positivados, negativados e cancelados) na caixa coletora de materiais perfurocortantes, sem necessidade de tratamento prévio na unidade geradora. A empresa coletora do resíduo infectante dará a destinação final adequada, em observância ao art. 111 da RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 e RDC 222/18.

Passo 10. Registrar todos os resultados (positivo, negativo e cancelado) no livro de registro dos resultados, conforme anexo 02.

Observações Finais:

A limpeza do equipamento deverá ser realizada sempre que necessário. Para tanto, leia o tópico “Limpeza e manutenção”, disponível no Manual da Incubadora, p. 49 (Disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6).

Jamais utilizar álcool na limpeza do equipamento.

Em caso de suspeita de mau funcionamento da incubadora, seguir o “Fluxo em Caso de Suspeita de Mau Funcionamento da Incubadora” (Anexo 05).

O líquido arroxado no interior do indicador (meio de cultura) **não** mudará de cor ao final do tempo de incubação, em nenhuma hipótese.

A luz indicadora de papel da impressora começará a piscar quando não houver papel para impressão de tíquetes. Para substituir o papel, consultar o Manual da Incubadora IC1020FR, página 46 (Disponível no Processo SEI nº 25.0.045311-6)

O papel térmico utilizado na incubadora é fornecido pelo fabricante. O pedido do papel térmico deverá ser realizado ao CAME, via Sistema SIG SaudeTech (Olostech), no seguinte caminho:

Serviços de Unidade > Materiais > Grade Pedido > Selecione > Ambulatorial -Atenção Primária > Nova Grade Pedido para Came > Selecione > Comodato > Bobina para Incubadora - Rolo.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 NGA Willian Waldelino Custódio da Silva Larissa Pereira da Silva UBSF Paranaguamirim Elias Gaspar da Rosa	2025 NGA Maristela Mello de Aguiar Manuelle Martins Holscher Laboratório Municipal Diego Valdrich	2025 Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco



Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo SEI nº 25.0.045311-6

Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde



Anexo 01. Guia Rápido de uso do Indicador Biológico SISPACK SP220 e Incubadora IC10-20FR

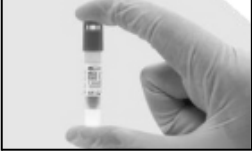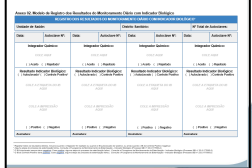A incubadora deve ser previamente conectada à rede elétrica para que aqueça adequadamente.	
Certifique-se de que a luz indicadora de temperatura (60°C) esteja piscando, o que indica que a incubadora está aquecendo. Aguarde até que a luz indicadora de temperatura pare de piscar e permaneça acesa, indicando que a temperatura ideal de funcionamento foi alcançada.	
Certifique-se de que o tempo de 3 (três) horas está selecionado tanto para a porção esquerda (posições de incubação 1 a 6), quanto para a porção direita (posições de incubação 7 a 12).	
Identifique os IBs (nº da autoclave, nº da carga, data do processo) e mantenha o IB com a tampa levantada; Coloque o IB dentro do pacote desafio; Posicione o Pacote Desafio próximo ao dreno da autoclave; Separe um IB de mesmo lote para ser o IB de Controle Positivo (NÃO ESTERILIZAR).	
Após o ciclo de esterilização, abra a autoclave e deixe a porta entreaberta por 10 (dez) minutos. Retire o Pacote Desafio da autoclave; Pressione a tampa do IB autoclavado e faça o mesmo com o IB de Controle Positivo.	
Verifique a mudança de cor do indicador químico na etiqueta do IB autoclavado (a faixa rosa deve escurecer após o processo de esterilização). Verificar a faixa rosa no IB de Controle Positivo (A faixa deste IB não pode mudar de cor, já que não é submetido ao processo de esterilização). Quebre o IB autoclavado e o IB de Controle Positivo no quebra ampolas da incubadora.	
Agite os indicadores vigorosamente de forma ascendente e descendente, até que o líquido arroxeadado (meio de cultura) molhe totalmente o algodão localizado no fundo da ampola (portador de esporos).	
Confira novamente o tempo de incubação (3 horas) e a temperatura (60°C). Insira os IBs nas posições de incubação. A incubação será iniciada automaticamente (as luzes de posição verde e vermelha começarão a piscar) Aguarde o resultado, que será impresso automaticamente.	
Luz VERDE estável (resultado negativo): Este resultado é esperado para todos os indicadores submetidos ao processo de esterilização e significa que a esterilização foi bem sucedida. Luz VERMELHA estável (resultado positivo): Este resultado SEMPRE deve ocorrer para o IB de Controle Positivo. Caso este resultado seja obtido para um IB autoclavado, é um indicativo de que alguma etapa do processo de esterilização falhou, reveja todo o processo.	
Registre os resultados obtidos no Livro Controle (Modelo Anexo ao POP - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR). Descarte TODOS os IBs na Caixa de Perfurocortantes.	

Anexo 02. Modelo de Registro dos Resultados do Monitoramento Diário com Indicador Biológico

LIVRO REGISTRO DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO DIÁRIO DA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADOR BIOLÓGICO ¹							
Unidade de Saúde:				Distrito Sanitário:		Nº Total de Autoclaves:	
Data:	Autoclave Nº:	Data:	Autoclave Nº:	Data:	Autoclave Nº:	Data:	Autoclave Nº:
COLE AQUI O INTEGRADOR QUÍMICO () Aprovado () Reprovado		COLE AQUI O INTEGRADOR QUÍMICO () Aprovado () Reprovado		COLE AQUI O INTEGRADOR QUÍMICO () Aprovado () Reprovado		COLE AQUI O INTEGRADOR QUÍMICO () Aprovado () Reprovado	
Resultado Indicador Biológico: () Autoclavado² () Controle Positivo³ ETIQUETA DO IB IMPRESSÃO DO RESULTADO Observações: () Positivo () Negativo		Resultado Indicador Biológico: () Autoclavado () Controle Positivo ETIQUETA DO IB IMPRESSÃO DO RESULTADO Observações: () Positivo () Negativo		Resultado Indicador Biológico: () Autoclavado () Controle Positivo ETIQUETA DO IB IMPRESSÃO DO RESULTADO Observações: () Positivo () Negativo		Resultado Indicador Biológico: () Autoclavado () Controle Positivo ETIQUETA DO IB IMPRESSÃO DO RESULTADO Observações: () Positivo () Negativo	
Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	

¹ Registrar todos os resultados obtidos, inclusive quando o integrador for rejeitado ou quando o IB autoclavado der positivo, ou ainda quando o IB de Controle Positivo negativar.

² O IB Autoclavado sempre deve negativar. Caso positivo, alguma etapa do processo de esterilização falhou. Consulte o Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico (Processo SEI nº 25.0.045311-6)


³ O IB de Controle Positivo sempre deve positivar. Caso negativo, alguma etapa do processo falhou. Consulte o Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico (Processo SEI nº 25.0.045311-6)

Anexo 03. Modelo de Registro dos Resultados do Monitoramento da Esterilização com Integrador Químico Classe 5 (a cada ciclo)

LIVRO REGISTRO DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO COM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 (A CADA CICLO)					
Unidade de Saúde:			Distrito Sanitário:		Nº Autoclave:
Ciclo 01	Data:	Hora:	Ciclo 06	Data:	Hora:
<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado			<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado		
Assinatura:			Assinatura:		
Ciclo 02	Data:	Hora:	Ciclo 07	Data:	Hora:
<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado			<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado		
Assinatura:			Assinatura:		
Ciclo 03	Data:	Hora:	Ciclo 08	Data:	Hora:
<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado			<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado		
Assinatura:			Assinatura:		
Ciclo 04	Data:	Hora:	Ciclo 09	Data:	Hora:
<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado			<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado		
Assinatura:			Assinatura:		
Ciclo 05	Data:	Hora:	Ciclo 10⁴	Data:	Hora:
<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado			<i>COLE AQUI INTEGRADOR QUÍMICO</i> () Aprovado () Reprovado		
Assinatura:			Assinatura:		
Observações:					

⁴ Higienizar a autoclave.

Anexo 04. Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico.

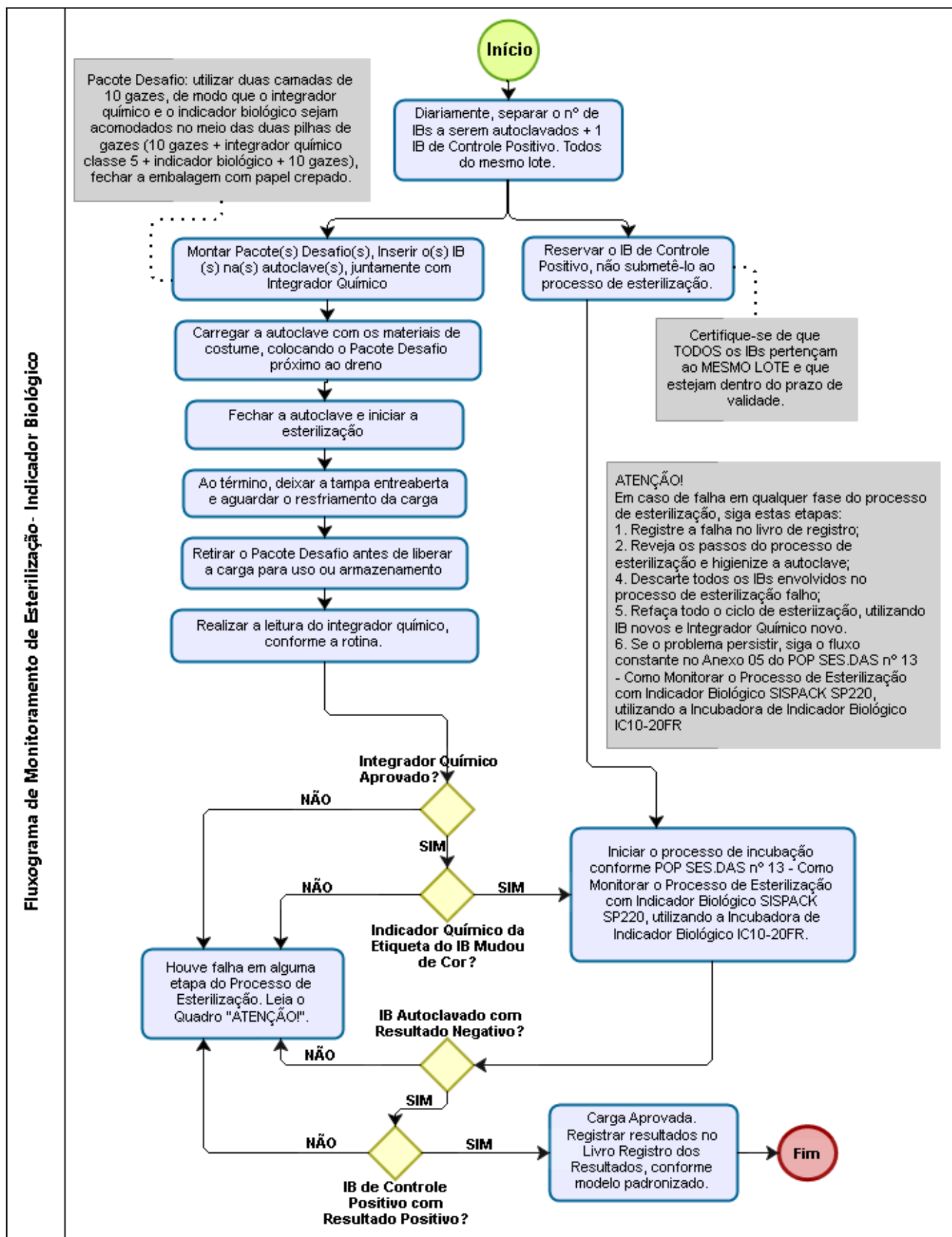

Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), 2025

Anexo 05. Fluxo em Caso de Suspeita de Mau Funcionamento da Incubadora

21/02/2025, 11:14

SEI/PMJ - 0024565249 - Memorando



MEMORANDO SEI Nº 0024565249/2025 - SES.UAD.CAME

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

Às Unidades de Saúde

Técnica

C/C: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde e Diretoria

C/C: Gerências de Distritais da Atenção Primária

C/C: Gerência de Serviços Especiais

C/C: Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal

C/C: Gerência de Vigilância em Saúde

A/C: Coordenações de Unidades e de Serviços de Saúde

Assunto: Complemento do Memorando nº 0024359514/2025 SES.UAD.CAME

Cumprimos cordialmente, em complemento e correção ao que foi informado através do documento SEI nº 0024412583/2025, informa-se:

1. Na ocorrência de defeito no equipamento, a Sispack será notificada oficialmente para substituição e/ou realização do reparo em até 10 (dez) dias úteis (cláusula prevista no item 8.6), desde que seja seguido o seguinte protocolo:

SEQ	O QUE	QUEM	COMO	OBS
1	Acionar equipe técnica do SISPACK	UBSF	via telefone 011 2955-2222 (fixo) 011 98988- 8760 (whatsapp) 011 99251- 8524 (whatsapp)	Seguir orientações do técnico da empresa contratada.
2	¹ Solicitar Substituição	UBSF	² Via Formulário específico "TROCA POR DEFEITO"	Preencher detalhadamente os itens do formulário.
3	Notificar SISPACK	CAME	Depois do recebimento de Formulário específico enviado pela UBSF	³ Anexar evidências da situação ocorrida e aguardar a confirmação de recebimento.

¹ Somente se as orientações do Técnico não foram resolutivas;

² O formulário só poderá ser ACESSADO via OLOSTECH na "aba" AVISOS, pasta CRONOGRAMA CAME, por servidores que possuam conta google@joinville.sc.gov.br, ou seja, servidores com endereço eletrônico originados do ZARAFA e/ou KOPANO não terão acessos ao link do formulário que é restrito aos usuários do google@joinville.sc.gov.br;

³ O prazo de 10 dias começa a contar da data de recebimento da notificação por parte do CAME.

2. Ao realizar contato com o whatsapp da empresa contratada informe os dados do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ: 08.184.821/0001-37) e faça um vídeo com clareza e objetividade, de forma a apontar o problema apresentado na incubadora;

3. Após as tratativas com a empresa, não sendo solucionado o problema da incubadora, o servidor com **conta google** precisará entrar no OLOSTECH e acessar o link de acesso aos formulários.

Sem mais, a Central de Administração de Materiais e Equipamentos se coloca a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Viebranz, Gerente**, em 20/02/2025, às 09:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Baartz Ferreira, Coordenador(a)**, em 20/02/2025, às 11:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024565249** e o código CRC **AF1D2DAB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.204987-6

0024565249v10