

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 03	nº 24	01 à 06
Nome do Procedimento: Recomendações quanto ao manuseio e uso adequados da máscara de proteção respiratória tipo N95				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Todos os profissionais que prestam assistência direta ao usuário, ou profissionais que realizam atividades junto aos usuários em isolamento por aerossóis, bem como a equipe da higienização que executam mecânica no setor de isolamento respiratório				
Objetivo: Orientar os profissionais quanto ao manuseio e uso da máscara de proteção respiratória tipo N95				
Recursos necessários: ✓ Máscara de proteção respiratória tipo N95; ✓ Pia com água para lavagem das mãos; ✓ Dispenser de sabonete líquido; ✓ Dispenser de papel toalha; ✓ Sabonete ou detergente líquidos; ✓ Papel toalha; ✓ Álcool 70%; ✓ Lixeira para descarte de material comum.				

CONCEITO

As máscaras de proteção respiratória (respirador particulado – máscara N95/PFF2 ou equivalente) são Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que proporcionam uma vedação adequada sobre a face do usuário, possuindo um filtro de eficiência mínima de filtração de 95%, sendo eficaz na retenção de gotículas e aerossóis e deve estar apropriadamente ajustada à face do profissional.

O uso da máscara N95 é obrigatório para todos os profissionais de saúde e de apoio que desenvolvam suas atividades em uma área em que há realização de procedimentos geradores de aerossóis e/ou durante toda a assistência em usuários suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, tuberculose, varicela, sarampo ou hantavírus.

São alguns exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais, broncoscopias, etc.

Importante: Ressalta-se que a máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula expiratória, não pode ser utilizada como controle de fonte, pois ela permite a saída do ar expirado pelo profissional que, caso esteja infectado, poderá contaminar usuários, outros profissionais e o ambiente. O profissional de saúde **NÃO** deve utilizar sobreposta à máscara N95 e equivalente, pois **NÃO** garante proteção de filtração ou contaminação.



DESCRIÇÃO

A máscara N95 é considerada semi descartável por permitir o seu uso por mais de uma ocasião em algumas situações, mas deve ser individualizada, podendo ser reutilizada seguindo as orientações abaixo:

- ✓ Preferencialmente, utilizar protetor facial quando disponível, para minimizar possíveis respingos e gotículas que possam contaminar a porção externa da máscara;
- ✓ A máscara N95 é de uso individual, e pode ser reutilizada, sendo respeitado o prazo máximo de 5 dias de reutilização, conforme consenso da Secretária de Saúde, seguindo recomendações de órgãos competentes;
- ✓ A máscara deve estar em bom estado de conservação (seca, sem sujidade visível ou odor desagradável, clip íntegro, alças elásticas com elasticidade preservada). Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas;
- ✓ O profissional deve realizar o teste de vedação com pressão positiva e negativa em todas as vezes que fizer o uso da máscara, a fim de garantir a vedação adequada (Nota 01, pág.05);
- ✓ Ao colocar e remover a máscara, deve-se garantir que não haja contaminação da parte interna da máscara, devendo acondicioná-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso, de modo que a mesma não seja dobrada, sem vincos ou torções (figuras 01 e 02);
- ✓ Utilizar sempre um saco ou envelope de papel ou embalagens plásticas perfuradas. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem;
- ✓ Se no processo de guarda ou remoção da máscara da embalagem houver contaminação da parte interna, ela deverá ser descartada imediatamente;
- ✓ Remover a máscara sempre que se dirigir a áreas comuns, como banheiros e refeitórios;
- ✓ Em Unidades de Coorte ou exclusivas para atendimento de Covid-19, a máscara deverá ser removida apenas para utilização de banheiros e refeitórios, devendo permanecer em uso durante todo o turno de trabalho. Nestas unidades, o uso da máscara deve ser considerado como exclusivo e de uso único, em virtude do tempo de uso com a mesma máscara;
- ✓ Para uso em quartos de isolamento, colocar a máscara antes de entrar no quarto, e removê-la imediatamente após sair da Unidade do usuário (POP Rotina nº 28 – Prevenção Aerossol).




Figura 01 – Colocação da Máscara N95/PFF2



Fonte: EPI Saúde, 2020



Figura 02 – Retirada da Máscara N95/PFF2

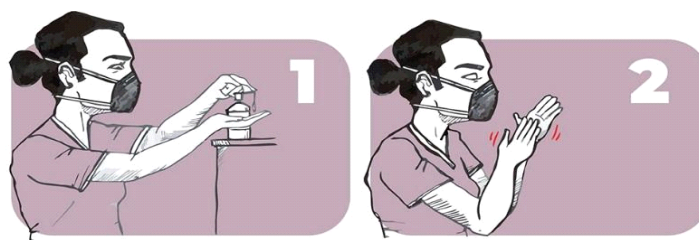

Lave as mãos com água e sabão, ou higienize com solução alcoólica a 70%



Após a completa higienização de mãos e antebraços, **utilize um novo par de luvas**;

Isso garantirá que você não irá transferir contaminantes para seu cabelo ou sua cabeça na hora de retirar a máscara;




Incline seu corpo levemente para frente. Lembre-se, é importante que você não encoste na frente do respirador. **Comece sempre pelo elástico da nuca**;

Pegue somente na parte de traz dos elásticos (a parte que esteve coberta pela touca). É importante que você **NÃO pegue nas laterais dos elásticos**, próximo ao respirador, ou mesmo no próprio respirador pois essas partes podem estar contaminadas.



Tendo já retirado o elástico da nuca **retire em seguida o elástico da cabeça**. Exerça uma tração nos elásticos para que a máscara não pule do rosto;

Remova a máscara pelos elásticos e **descarte imediatamente no lixo infectante**. Remover suas luvas, e descartá-las.

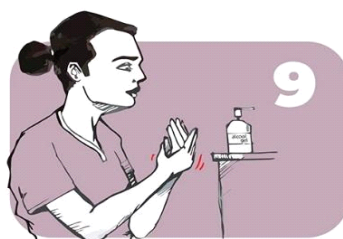

Higienize suas mãos com água e sabão ou álcool gel, imediatamente após esse procedimento.

Fonte: EPI Saúde, 2020

Uso Prolongado da Máscara N95/PFF2

Refere-se à prática de usar a mesma máscara N95/PFF2 para assistência contínua com vários usuários sem removê-la entre cada atendimento. O uso prolongado pode ser implementado em setores e unidades de coorte, ou quando vários usuários são colocados juntos em salas de espera ou enfermarias dedicadas exclusivamente ao atendimento de patologias respiratórias.

O uso prolongado é mais seguro pois envolve menos manuseios da máscara e, portanto, menor risco de transmissão do vírus. É importante que a máscara permaneça ajustada e funcional. De acordo com o fabricante, a eficácia é garantida com o uso contínuo da máscara por 8 horas, ou um plantão de 12 horas em Unidade exclusiva, garantindo que ela se mantenha íntegra, limpa e seca, e salvo de contaminações durante retiradas ocasionais para refeições e utilização do banheiro.

Uso Intermitente ou Reutilização da Máscara N95/PFF2

Refere-se à prática de usar a mesma máscara N95/PFF2 em momentos distintos, durante a assistência, mas removendo após cada encontro com os usuários, recolocando ao reiniciar a atividade. A máscara deve ser armazenada após o atendimento e recolocada antes de iniciar uma nova atividade ligada ao usuário.

Não há um consenso sobre o prazo de reutilização da máscara entre os órgãos reguladores ou fabricantes, porém, a Secretaria da Saúde, baseado nas Instruções Normativas e Diretrizes da Anvisa, preconiza a troca a cada 5 dias, se a mesma estiver em condições de uso conforme descrito acima.

Nota: Teste de Pressão Positiva e Negativa

Cubra a máscara com as mãos o máximo possível, sem pressionar o dispositivo contra a face, de modo que a frente da máscara fique ocluída pelas mãos.

Expire profundamente. Uma pressão positiva dentro da máscara significa que não tem vazamento. Se houver vazamento de ar por algumas das bordas ou pontos da máscara, ajuste a posição e/ou as alças de tensão. Teste novamente a vedação. Repita os passos até que a máscara esteja vedando corretamente.

A seguir, realize o teste de pressão negativa da vedação, inspirando profundamente. Se não houver vazamento, a pressão negativa fará o respirador agarrar-se no seu rosto. O vazamento resultará em perda da pressão negativa na máscara devido a entrada de ar através de lacunas na vedação, permitindo passagem de ar pelas bordas e extremidades.

Em caso de vazamentos, a máscara deve ser substituída.

Observações:

- ✓ Cicatrizes profundas e alterações na face podem interferir na vedação da máscara;
- ✓ Uso de barba e bigode, devem ser evitados, para melhorar a vedação da máscara ao rosto;
- ✓ Dobrar, amassar ou esticar a máscara, pode causar o rompimento das fibras, inutilizando a máscara;
- ✓ Sempre que possível e disponível na Unidade, intercalar o uso de duas máscaras, para manter uma das máscaras arejando por 24 horas, e mantendo a troca diária de um dispositivo pelo outro.



REFERÊNCIA

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. **Orientações sobre o uso de máscaras de proteção respiratória (respirador particulado – N95/PFF2 ou equivalente) frente à atual situação epidemiológica referente à infecção pelo SARS-COV-2 (COVID-19)**. Brasília – DF: 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020**. “Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)”. Brasília – DF: 2020.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores de Saúde**. (Última atualização 16/03/2016). Brasília – DF: 2016.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in Healthcare Settings**. NCIRD, Division of Viral Diseases, 2020.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Orientação sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIs)**. São Paulo – SP: 2020.
- DUARTE, L. R. P.; et al. Universidade de São Paulo. Revista da Escola de Enfermagem da USP. **Estado de conservação de respiradores PFF-2 após uso na rotina hospitalar**. São Paulo – SP: 2010. v.44, n.4, p.1011-1016.
- EPI Saúde. **Colocação e Retirada da N95**. São Paulo, 2020. Acesso em 30/07/2021. Disponível em: <https://www.episaude.org/?p=140>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Shortage of personal protective equipment endangering health workers worldwide**. Genebra, 2020.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2020 Renata Andrade Teixeira Heil 2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2020	Renata Andrade Teixeira Heil	
03	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Inclusão de itens nos recursos necessários; • Inclusão do conceito; • Alteração da descrição; • Inclusão da Figura 01 e 02; • Inclusão do item Uso Prolongado da Máscara N95/PFF2 • Inclusão do item Uso Intermitente ou Reutilização da Máscara N95/PFF2; • Inclusão do item Nota 01 – Teste de pressão positiva e negativa.

