

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

|                              |                                      |                            |                        |                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Emissão</b><br>13/08/2026 | <b>Próxima Revisão</b><br>13/08/2028 | <b>POP.SES.APS.ENF.002</b> | <b>Versão</b><br>nº 06 | <b>Página</b><br>1/6 | <b>Anexos</b><br>00 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|

**Procedimento:** Secagem e Armazenamento de Amostras Biológicas dos Testes do Pezinho e Mãe Catarinense

**Gerências responsáveis pelos serviços executantes:** Gerências Distritais da Atenção Primária e Gerência Técnica de Enfermagem

**Serviços executantes:** Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF)

**Profissionais executantes das tarefas:** Profissionais de enfermagem, conforme competências legais e atribuições previstas neste POP

**Objetivo:** Padronizar e orientar o procedimento de secagem e armazenamento das amostras biológicas em papel-filtro dos **Testes do Pezinho e Mãe Catarinense**, assegurando a preservação da integridade das amostras antes do envio ao laboratório de referência (FEPE).

**Recursos necessários:**

- Estante de secagem;
- Envelope padronizado do teste do pezinho e mãe catarinense;
- Recipiente plástico com tampa;
- Refrigerador ou caixa térmica.

### 1. DEFINIÇÃO

O processo de secagem e armazenamento das fichas de coleta em papel-filtro deve seguir etapas rigorosas para a preservação e integridade dos espécimes biológicos, garantindo amostras satisfatórias e a precisão das análises laboratoriais dos Testes do Pezinho e Mãe Catarinense.

As amostras devem ser submetidas à um processo obrigatório e correto de secagem antes do envio ao laboratório especializado da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE).

### 2. SECAGEM E ARMAZENAMENTO

**Passo 1.** Imediatamente após a coleta das amostras, acomodar o papel filtro em estante própria (fornecida pela FEPE) **ou na falta desta**, em superfície plana na posição horizontal que permita a distribuição do sangue de forma homogênea;

**Passo 2.** Deixar a amostra secando em temperatura ambiente (20° a 25°C) **por 3 horas**;



| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP |                                      |                            |                        |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Emissão</b><br>13/08/2026          | <b>Próxima Revisão</b><br>13/08/2028 | <b>POP.SES.APS.ENF.002</b> | <b>Versão</b><br>nº 06 | <b>Página</b><br>2/6 | <b>Anexos</b><br>00 |

**Passo 3.** Obedecer os seguintes critérios no cuidado com as amostras:

- Colocar a ficha em superfície plana e limpa;
- Deixar os círculos de sangue livres;
- Evitar contato com outras fichas;
- Manter longe do sol direto ou outras fontes diretas de calor;
- Manter longe de ventilação direta, conforme a Figura 01;

**Figura 01.** Secagem da ficha de coleta



Fonte: FEPE, 2026.

**Importante:**

**Nunca** toque, passe o dedo ou utilize qualquer objeto na área dos círculos impregnados de sangue para verificar se a amostra está seca. O contato direto contamina a amostra com resíduos, secreções ou substâncias químicas, tornando-a **inadequada/imprópria** para a análise laboratorial.

**Passo 4.** Após cumprido o tempo de secagem de **3 horas**, realizar a inspeção visual da amostra para confirmar se o sangue está totalmente seco, observando as seguintes características:

- **Coloração:** o sangue seco deve apresentar uma cor **acastanhada, escura e uniforme** (o sangue ainda úmido mantém o tom vermelho-vivo/brilhante);
- **Aparência/Aspecto:** o círculo de sangue deve estar **opaco e sem brilho**, com o papel-filtro completamente plano, sem dobras e livre de umidade residual;




| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP |                                      |                            |                        |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Emissão</b><br>13/08/2026          | <b>Próxima Revisão</b><br>13/08/2028 | <b>POP.SES.APS.ENF.002</b> | <b>Versão</b><br>nº 06 | <b>Página</b><br>3/6 | <b>Anexos</b><br>00 |

**Passo 5.** Retirar a amostra da estante de secagem e armazenar num **recipiente plástico transparente, higienizado, hermeticamente fechado e seco;**

**Passo 6.** Acomodar o recipiente com a amostra seca no refrigerador até o momento do envio, conforme imagem a seguir:

**Figura 02.** Acomodação do recipiente no refrigerador

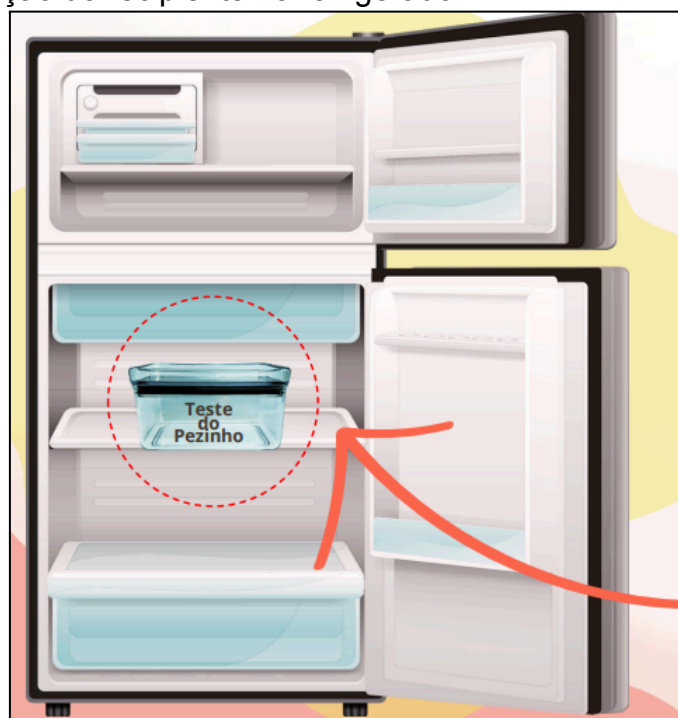

**Fonte:** Prefeitura de Ribeirão Preto, 2026.

**Passo 7.** Enviar as amostras ao laboratório especializado (FEPE) via SEDEX/Correios, seguindo as instruções do POP.SES.APS.ENF.004 - Envio das Amostras dos Testes do Pezinho e Mãe Catarinense à FEPE via SEDEX, disponível para acesso em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#);



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

|                              |                                          |                            |                        |                      |                     |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Emissão</b><br>13/08/2026 | <b>Próxima<br/>Revisão</b><br>13/08/2028 | <b>POP.SES.APS.ENF.002</b> | <b>Versão</b><br>nº 06 | <b>Página</b><br>4/6 | <b>Anexos</b><br>00 |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|

### Importante:

- Caso o envio imediato não seja possível, a amostra deve permanecer armazenada sob as condições adequadas de proteção contra umidade e luz até o momento de sua postagem ao laboratório da FEPE (**conforme item 2 deste documento**);
- Em caso de degelo ou falta de energia (**não utilizar a mesma geladeira de imunobiológicos**);
- Pode ser caixa de isopor, sem gelo reutilizável para uma melhor preservação;
- Em condições atípicas de calamidades, o profissional de saúde deve orientar as famílias sobre a possibilidade de uma convocação para nova coleta devido ao atraso no transporte e risco elevado de perda da amostra neste período (SES, 2025).
- Retenções de amostras e outras ocorrências, consultar a [NOTA TÉCNICA 001/2024 DAPS/SPS/SRTN/SES, ORIENTAÇÕES PARA O PROCEDIMENTO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA TRIAGEM NEONATAL BIOLÓGICA EM SANTA CATARINA.](#)



| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP |                                      |                            |                        |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Emissão</b><br>13/08/2026          | <b>Próxima Revisão</b><br>13/08/2028 | <b>POP.SES.APS.ENF.002</b> | <b>Versão</b><br>nº 06 | <b>Página</b><br>5/6 | <b>Anexos</b><br>00 |

**Quadro 01.** Alterações das versões do Documento de 2023 para 2026

| ÁREA/TEMA            | VERSÃO 2023                                                                                         | VERSÃO 2026                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de publicação  | Disponível no processo SEI nº 20.0.059657-0                                                         | Disponível no processo SEI nº 26.0.098292-7                      |
| Secagem das amostras | Breve informação no Passo 19 do POP SES.ENF nº 07 - Triagem Neonatal – Teste do Pezinho Versão nº05 | Passa a ser documento próprio elaborado em 2026 como a 6ª versão |

**LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS**

FEPE: Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional  
 POP: Procedimento Operacional Padrão;  
 SC: Estado de Santa Catarina;  
 SEI: Sistema Eletrônico de Informação;  
 SES: Secretaria Municipal de Saúde;  
 SIG-SaudeTech: Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech);  
 UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família.

**REFERÊNCIAS**

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. **Triagem neonatal biológica**: manual técnico. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Cartaz esquema de coleta**. Curitiba: FEPE, 2020.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Manual técnico de coleta para o "Teste do Pezinho"**. Curitiba: FEPE, 2013.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Nota Técnica nº 01/2024**: coleta, armazenamento e envio de amostras — Triagem Neonatal. Curitiba: FEPE, 2024.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Orientações importantes sobre o Teste do Pezinho — Santa Catarina**. Curitiba: FEPE, [s.d.]. Disponível em: <https://www.fepe.org.br/orientacoes-importantes-sobre-o-teste-do-pezinho-santa-catarina/>. Acesso em: 23 jul. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Nota Técnica nº 001/2024**



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

|                              |                                      |                            |                        |                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Emissão</b><br>13/08/2026 | <b>Próxima Revisão</b><br>13/08/2028 | <b>POP.SES.APS.ENF.002</b> | <b>Versão</b><br>nº 06 | <b>Página</b><br>6/6 | <b>Anexos</b><br>00 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|

**DAPS/SPS/SRTN/SES:** orientações para o procedimento de coleta, armazenamento e envio de amostras biológicas para triagem neonatal biológica em Santa Catarina. Florianópolis: SES/SC, 18 jan. 2024. Disponível em:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-GrtgyvhaVv7HkfAMD8RKCPeEuliMzYf>. Acesso em: 18 mar. 2025.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria de Atenção Primária à Saúde.

**Nota técnica:** orientações para o procedimento de coleta do Teste do Pezinho. Florianópolis: SES/SC, 2023. Disponível em:

<https://www.cosemssc.org.br/wp-content/uploads/2023/07/Nota-tecnica-teste-do-pezinho-1-1.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2026.

| Elaborado por:                                                       | Revisado por:                                                                                                                                                                              | Aprovado por:                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2023</b><br><br><b>5º Versão</b><br><br>Fernanda Cristina Spiller | <b>2023</b><br><br>Deisy P. Navarro Lins<br>Fiorentin Fernanda Cristina Spiller<br>Gabriela Cristina da Silva Brandão<br><br><b>2026</b><br><br>Dariza Caroline Neermann<br>Vanessa Ristow | <b>2023</b><br><br>Maristela Mello de Aguiar<br>Vanessa Cardoso Pacheco.<br><br><b>2026</b><br><br>Gabriela Neves Buch;<br>Juliana Antunes Safanelli. |

**Disponível em:**

**Sistema Eletrônico de Informação (SEI):** Processo nº 26.0.098292-7

**Site da Prefeitura:** [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#)

