


Prefeitura de
Joinville

Procedimento Operacional Padrão - POP

Data de Emissão 27/01/2021	Data de Aprovação 27/01/2021	Data da Vigência 27/01/2021	Próxima Revisão 27/01/2023	Versão nº 01	Rotina nº 32	Página 01 de 07
Nome do Procedimento: Realização do Procedimento de Eletrocardiograma.						
Área: Diretoria de Atenção Primária à Saúde.			Sector: Unidades Básicas de Saúde da APS.			
Executantes: Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem						
Objetivo: Orientar os profissionais quanto a realização do procedimento de Eletrocardiograma para obter registro gráfico da atividade cardíaca e obtenção de diagnóstico, avaliação da terapêutica medicamentosa e evolução clínica.						
Recursos necessários: • Pia com água para lavagem das mãos; • Dispenser de sabão; • Dispenser de papel toalha; • Sabonete ou detergente líquido; • Papel toalha; • Álcool 70%; • Computador e seus complementos como: mouse e teclado; • Impressora e folha A4 ou papel termo sensível, papel milimetrado ou telecárdio, adequado ao aparelho; • Eletrocardiógrafo, com cabos de paciente e cabo elétrico; • Cardioclip; • 4 braçadeiras e 6 eletrodos descartáveis ou pêras para o paciente ou 10 eletrodos descartáveis para paciente neonatal e pediátrico; • Eletrodo descartável ou eletrodo de sucção; • Algodão ou gaze pequena; • Gel hidrossolúvel condutor; • Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário); • Luvas de procedimento (se necessário); • Lixeira para descarte de material comum; • Maca forrada; • Lençol de tecido (se necessário); • Lençol de papel descartável; • Escada.						
Conceito: Consiste na preparação do paciente para realização do procedimento de Eletrocardiograma.						

Descrição:


1. Checar a prescrição médica;
2. Checar a identidade do paciente;
3. Checar o funcionamento do eletrocardiógrafo;
4. Checar a presença e integridade do cabo de força, fio terra, cabo do paciente, braçadeiras e eletrodos ou pêras;
5. Higienizar as mãos conforme POP - Rotina 23 - Higienização das Mãos;
6. Reunir os materiais necessários para realizar o procedimento;
7. Realizar a troca de lençóis de papel descartável à cada procedimento realizado;
8. Apresentar-se ao paciente e orientar sobre o procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;
9. Promover a privacidade do paciente (utilizar biombo se necessário);
10. Solicitar a retirada e/ou retirar os objetos metálicos e/ou eletrônicos;
11. Calçar luvas de procedimentos (se necessário);
12. Solicitar e/ou posicionar o paciente em decúbito dorsal, com membros superiores e membros inferiores paralelos ao corpo, de forma não adjacente, relaxados;
13. Solicitar e/ou expor tornozelos, punhos e tórax;
14. Cobrir o paciente, com auxílio do lençol de tecido ou descartável, para que o mesmo não fique totalmente exposto;
15. Solicitar ao paciente que permaneça em repouso, evite tossir ou conversar, enquanto o ECG está sendo registrado;
16. Realizar a antisepsia com algodão embebido com álcool a 70% das faces anteriores dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos tornozelos (acima dos maléolos internos);
17. Colocar as braçadeiras e os cardioclip em membros superiores e inferiores, usando gel hidrossolúvel condutor ou outro material de condução (conforme orientação do fabricante), para obtenção dos registros das derivações monopolares e bipolares. Seguindo o arranjo de cabos, de acordo com a descrição abaixo:
 - Cabo vermelho (RA) em membro superior direito.
 - Cabo amarelo (LA) em membro superior esquerdo.
 - Cabo preto (RL) em membro inferior direito.
 - Cabo verde (LL) em membro inferior esquerdo.

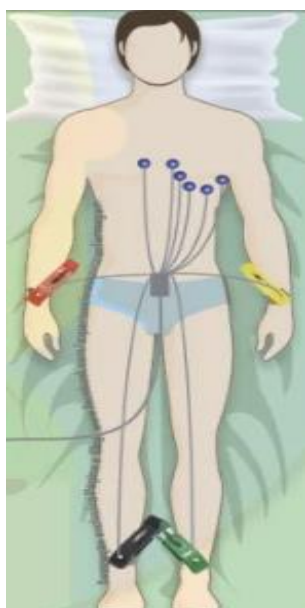

Fonte: <https://enfermagemilustrada.com/eletrocardiograma/>

18. Colocar os eletrodos de sucção (preferencialmente), ou eletrodos descartáveis no tórax, utilizando gel hidrossolúvel condutor ou outro material de condução (conforme orientação do fabricante) para obtenção de registro das derivações precordiais. Seguindo o arranjo de cabos, de acordo com a descrição abaixo:

- Cabo vermelho (V1) em 4º espaço intercostal, à direita do esterno;
- Cabo amarelo (V2) em 4º espaço intercostal, à esquerda do esterno;
- Cabo verde (V3) em 5º espaço intercostal, diagonalmente entre V2 e V4;
- Cabo marrom (V4) em 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular à esquerda;
- Cabo preto (V5) em 5º espaço intercostal, na linha axilar anterior;
- Cabo roxo (V6) em 5º espaço intercostal, na linha axilar média.

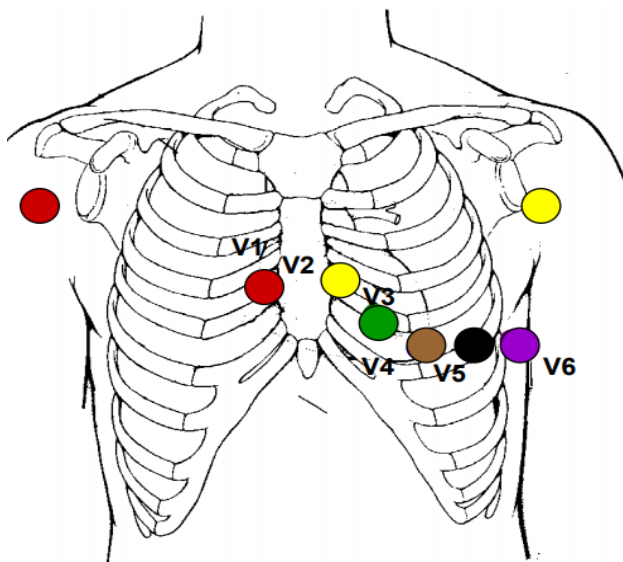

Fonte: http://saude.campinas.sp.gov.br/especialidades/impressos/ecg_posic_eletrodos.pdf

Iniciar o Procedimento de Eletrocardiograma:

Para iniciar o registro do procedimento no HW *HeartWare* - Sistemas para Cardiologia ECG V6, disponível aos profissionais de saúde, nas Unidades de Saúde de Joinville.

Passo 01: Na tela inicial, clique no ícone , NOVO ELETROCARDIOGRAMA.



Passo 02: Na tela, NOVO ELETROCARDIOGRAMA selecione a opção NOVO PACIENTE.




Passo 03: Na tela DADOS DO PACIENTE, preencha com as informações do paciente, somente os campos em destaque demonstrados na figura abaixo. Ao concluir as informações clique em ANAMNESE.



Passo 04: Na tela DADOS DA ANAMNESE, preencha com as informações do paciente os campos em destaque, informações de **peso** em (kg) e **altura** em (m), **médico solicitante**, **data do exame**, **medicação em uso** e o campo **observações**, que deve ser preenchido com sinais e sintomas do paciente. Ao concluir as informações nos campos em destaque (**neste momento o paciente deve estar posicionado e com os eletrodos conectados**), clique em TRAÇADOS, conforme a figura abaixo.


Passo 05: Na tela PACIENTE, para dar início a monitoração do procedimento de Eletrocardiograma seguir a sequência abaixo:

- 1º - Clique em INICIAR MONITORAÇÃO representado pelo ícone ;
- 2º - Clique em REGISTRAR SINAL, representado pelo ícone , conforme a figura abaixo.

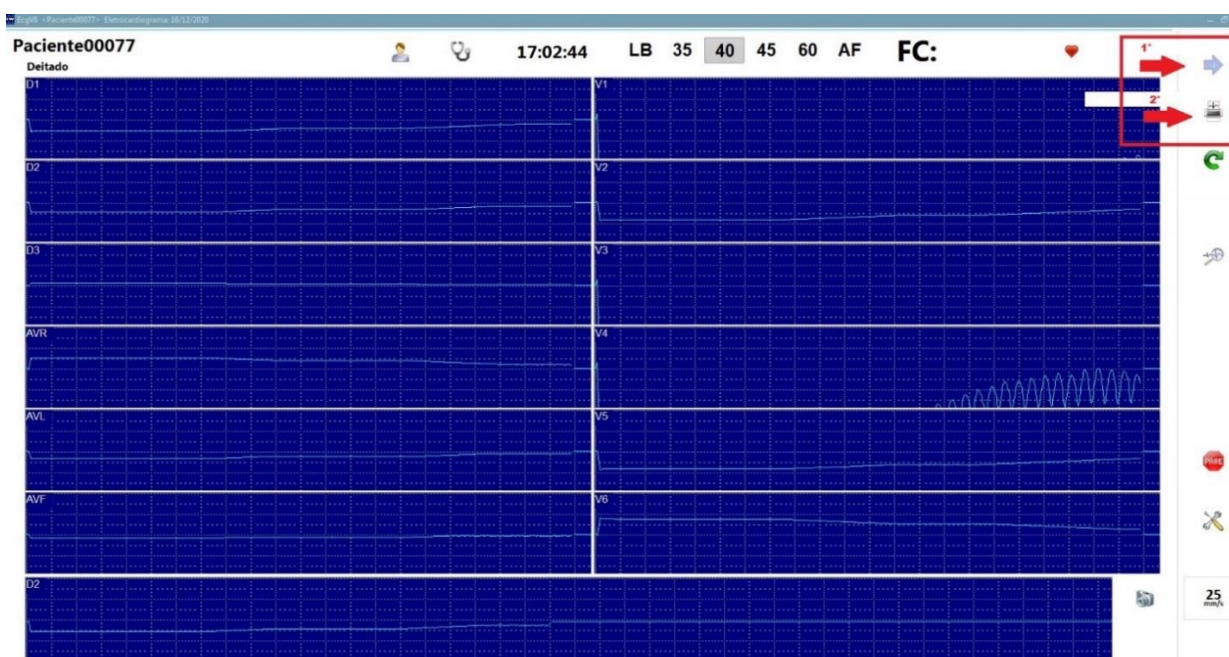


A partir deste momento, o Sistema vai iniciar o registro dos dados clínicos, iniciado a monitoração do procedimento.

Passo 06: Na tela EDIÇÃO DE P.A. preencha o campo Sist. / Diast (sistólica e a diastólica) com a pressão arterial do paciente. Ao concluir as informações clique em OK, conforme a figura abaixo.

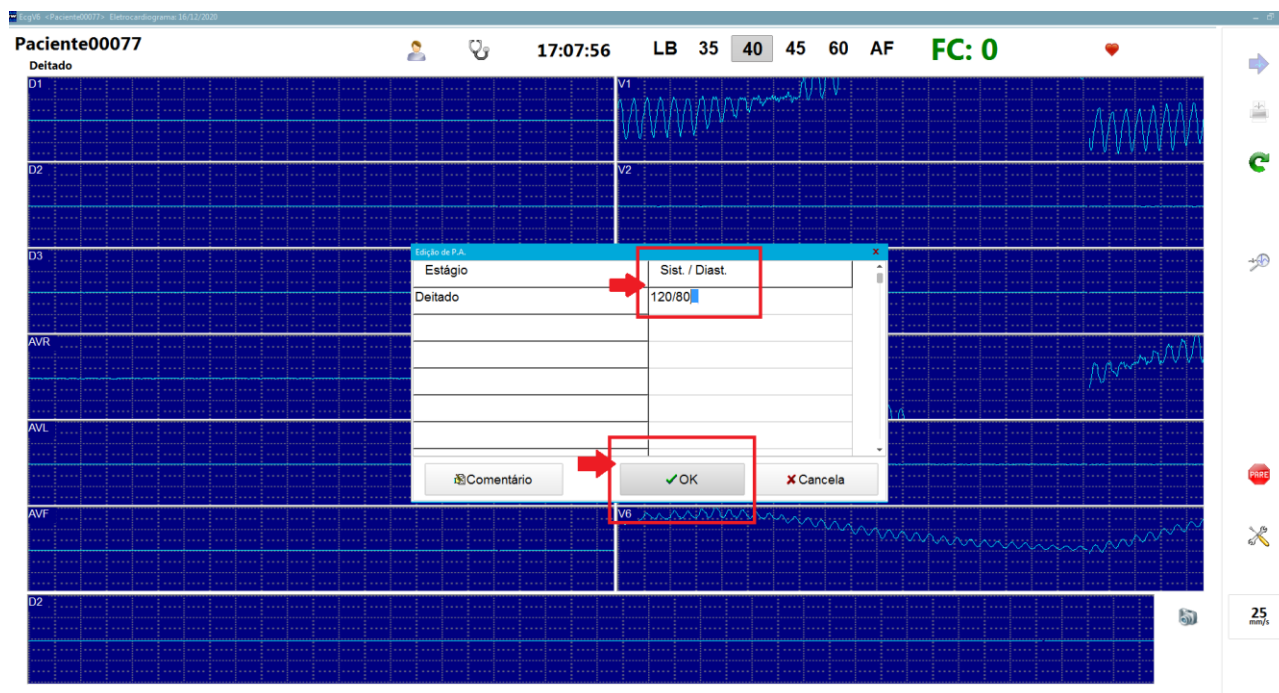

Passo 07: Na tela PDF, clicar em SALVAR.

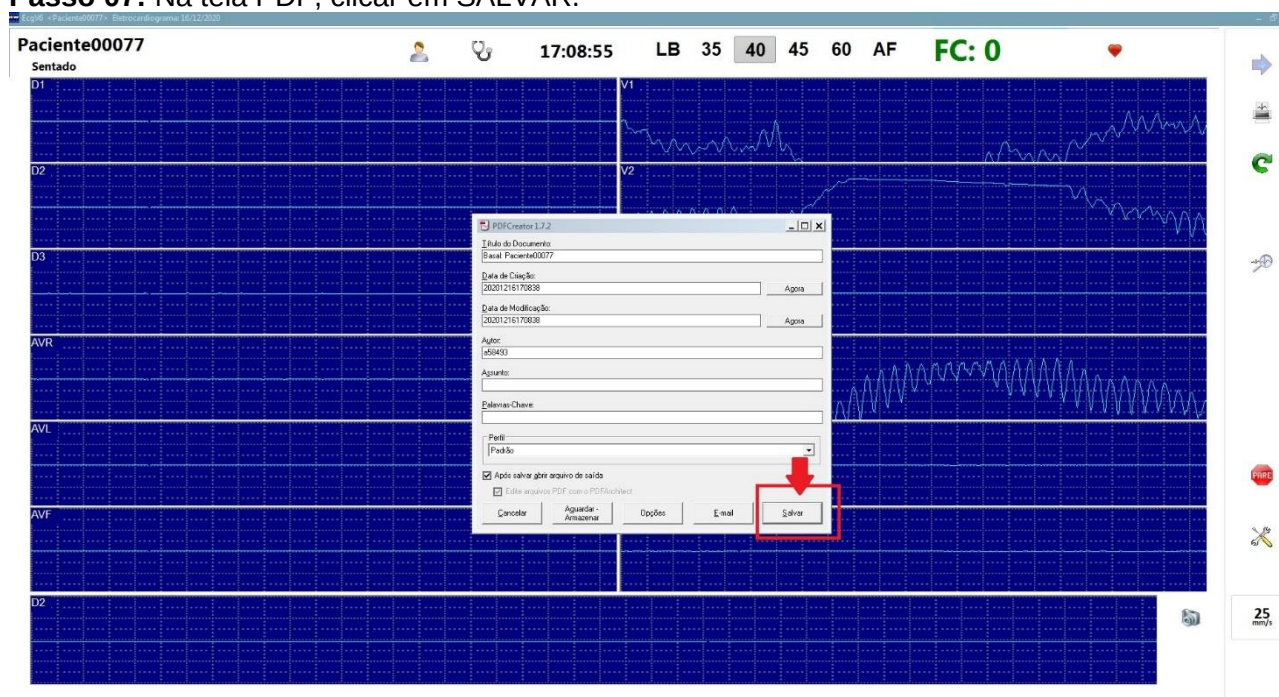

Descrição após procedimento finalizado:

- Retirar os eletrodos e remover os resíduos do gel hidrossolúvel condutor do tórax e membros superiores e inferiores;
- Desprezar o material utilizado em local próprio;
- Organizar os fios e o eletrocardiógrafo, realizando a limpeza após cada procedimento nos eletrodos de sucção e cardioclip;
- Realizar a higienização das mãos conforme o POP – Rotina 23 - Higienização das Mãos;
- Registrar as anotações no Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saudetech);
- Selecionar o código de procedimento **03.01.10.026-8**.

Recomendações:

- O paciente não pode estar em contato com partes de metal da maca, deve permanecer imóvel e em posição confortável;
- É conveniente limpar com álcool à 70% o local da aplicação dos eletrodos. Se o paciente tiver muito pelo, realizar tricotomia;
- Utilizar gel hidrossolúvel condutor somente quando houver necessidade (quando eletrodos não fixar bem na pele), colocar em pouca quantidade nos eletrodos, pois, são meios de cultura para bactérias.

Ações em casos de não conformidade:

- Em caso de recusa do paciente, informar quanto aos riscos da não realização do procedimento, registrar no prontuário do mesmo e comunicar a equipe médica;
- Caso o equipamento apresente defeito, solicitar ao coordenador, a manutenção do aparelho pelo NTI (Núcleo da tecnologia de informação/ SES, via GLPI;
- Caso o traçado apresente sinais de interferência, verificar:
 - A fixação dos eletrodos;
 - As braçadeiras;
 - A quantidade utilizada de álcool;
 - Posicionamento do paciente, sem tocar na maca e reforçar a necessidade do relaxamento.
- Em caso do paciente amputado ou muitas interferências, colocar os eletrodos nas extremidades do tórax próximo a articulação do braço e no abdome próximo a crista ilíaca;
- Caso o paciente apresente marcapasso, realizar o registro ou proceder com o exame normalmente, pois, de acordo com o fabricante, estimuladores elétricos e/ou marcapassos cardíacos podem ser usados, simultaneamente, com este equipamento.

Referências:

- EBSEH. Procedimento Operacional Padrão. **Realização de Eletrocardiograma**. 2018. Disponível em: <http://www2.ebserh.gov.br/documents/221436/4007044/POP.DivENF.INT.T018-2018+-+REALIZA%C3%87%C3%83O+DE+ELETROCARDIOGRAMA.pdf/bbc32e04-7e8e-4e4f-b34a-63a023f5c70f>. Data do acesso: 08/11/2020.
- Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. **Manual Procedimento Operacional Padrão. Realização de Eletrocardiograma**. 2016. Disponível em: http://www2.ebserh.gov.br/documents/17082/374045/POP_ENFERMAGEM.pdf/41341424-745e-45fb-8baa-ea9541523f39. Data do acesso: 08/11/2020.
- Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. **Manual de procedimentos operacionais padrão de enfermagem**. 2017. Disponível em: https://static.fecam.net.br/uploads/623/arquivos/1089388_Manual_de_Procedimentos_Operacionais_Padrao_de_Pescaria_Brava.pdf. Data do acesso: 08/11/2020.

Observação:

Este POP deverá ser revisado a cada dois anos.

Elaborado por: Marisandra Seyboth	Revisado por: Aline Gabrielle de Souza Comissão dos Enfermeiros Lara Cristina L. G. Machado Marisandra Seyboth Martha Maria V. de S. Abreu Artilheiro Maria Simone Pan	Aprovado por: Marisandra Seyboth	
Acesso	Disponível pelo Endereço Eletrônico		
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI: 21.0.014914-2		
Alteração após Revisão			
Nº	Data	Responsável	Alteração