

Prefeitura de
Joinville

Data de Emissão 28/09/2020	Data de Aprovação 28/09/2020	Data da Vigência 28/09/2020	Próxima Revisão 28/09/2022	Versão nº 01	Rotina 30	Página 01 a 04
Nome do Procedimento: Monofilmaneto para Avaliação do Pé Diabético						
Área: Secretaria da Saúde de Joinville			Setor: Todas Unidades de Saúde			
Executantes: Enfermeiros e Médicos						
Objetivo: Identificar a perda da sensibilidade protetora dos pés, para classificar o risco e prevenir complicações.						
Recursos necessários: • Pia com água para lavagem das mãos; • Dispenser de sabão; • Dispenser de papel toalha; • Sabonete ou detergente líquidos; • Papel toalha; • Álcool 70%; • Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para coleta: máscara, óculos e luvas de procedimento; • Monofilamento 10 gramas Semmes-Weinstem; • Algodão e/ou gaze pequena; • Lixeira para descarte de material comum; • Lixeira para descarte de material infectante.						
Descrição: • Higienizar as mãos: Lave sempre as mãos com água e sabão líquido. Praticar normas de biossegurança antes e após a cada procedimento para evitar contaminações; • Reunir o material e levar até o usuário: Separar materiais necessários como: luvas de procedimentos, álcool 70%, monofilamento e algodão; • Luvas de procedimento: Calçar as luvas de procedimento; • Promover o ambiente iluminado, calmo e privativo.						

Técnica do Procedimento:

Avaliação clínica geral dos pés:


- Como presença de deformidades;
- Lesões;
- Calçados;
- Calosidades;
- Pulsos pedioso e tibial posterior;
- Anatomia dos pés;
- Hidratação;
- Coloração;
- Temperatura;
- Distribuição dos pelos;
- Integridade das unhas e pele.

Teste do monofilamento:

- Esclarecer o usuário sobre o teste;
- Realizar inspeção dos pés e calçados;
- Colocar o usuário em posição confortável e expor os pés;
- Inicialmente aplica-se o monofilamento na mão ou no cotovelo do usuário de modo que ele saiba como será testado;
- Solicitar ao mesmo que diga "sim" cada vez que perceber o contato com o monofilamento;
- Aplicar o monofilamento adequado (10 gramas - cor laranja do Kit Sorri-Bauru) perpendicular à superfície da pele, sem que a pessoa examinada veja o momento do toque;
- Pressionar com força suficiente apenas para encurvar o monofilamento, sem que ele deslize sobre a pele;
- O tempo total entre o toque para encurvar o monofilamento e sua remoção não deve exceder 2 segundos.

Serão pesquisados dez pontos da região da plantar dos pés (primeiro hálux, terceiro e quinto dedo. Primeira, terceira e quinta cabeças dos metatarsos e regiões plantares dos pés. Conforme na figura abaixo).

Figura 01: Pontos da região da plantar dos pés

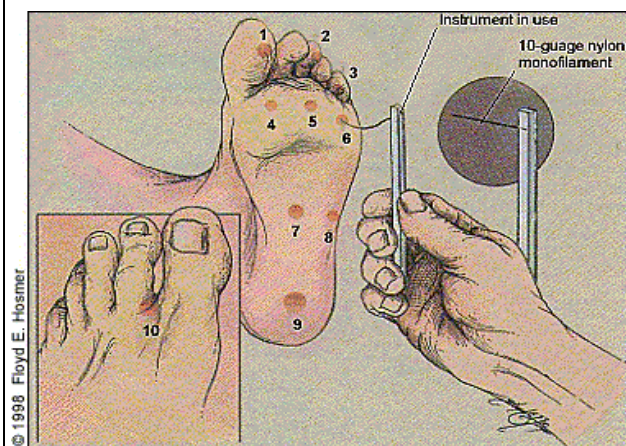

Fonte: Rached 2010

Em caso do usuário apresentar dificuldade em perceber o toque, o profissional deverá aplicar duas vezes no mesmo local, alternando com pelo menos uma vez simulada (não tocar), contabilizando no mínimo três perguntas por aplicação.

Classificação de risco:

Categoria de risco	Situação Clínica
Grau 0	Neuropatia ausente.
Grau 1	Neuropatia presente com ou sem deformidades (dedos em garra, dedos em martelo, prominências em ante pé, Chaecot).
Grau 2	Doença arterial periférica com ou sem neuropatia presente.
Grau 3	História de úlcera e/ou amputação.

Fonte: Brasil 2016

Acompanhamento recomendado:

Categoria de risco	Periodicidade de acompanhamento recomendada
0	Anual, preferencialmente com médico ou enfermeiro da AB.
1	A cada 3 a 6 meses, com médico ou enfermeiro da AB.
2	A cada 2 a 3 meses, com médico e/ou enfermeiro da AB; Avaliar necessidade de encaminhamento para outro ponto de atenção.
3	A cada 1 a 2 meses, com médico e/ou enfermeiro da AB, ou equipe especializada.

Fonte: Brasil 2016

Interpretação de resultado:

- A percepção da sensibilidade protetora está presente se duas respostas forem corretas das três aplicações;
- A percepção da sensibilidade protetora está ausente se duas respostas forem incorretas das três aplicações.

Outras considerações:

- O monofilamento não é de uso individual ou descartável;
- O monofilamento deve ficar em repouso por 24 horas, a cada dez usuários examinados (para manter a tensão de 10g);
- Identificar data da abertura do monofilamento, pois o mesmo produz vida útil de 18 meses.

REFERÊNCIAS

1. BALDASSARIS, M. L. R. M.; MARTÍNEZ, B. B. **Adaptação transcultural do instrumento para exame do pé diabético em 3 minutos**. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Rio de Janeiro – RJ: 2020. v.15, n.42, Jan-Dez, 2008. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2008/1518>. Acesso em: 28 ago. 2020.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. **Manual do Pé Diabético**. Brasília – DF: 2016. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_do_pe_diabetico.pdf. Acesso em: 28 abr. 2020.
3. SILVA, C. C. R.; SOUZA, N. S. S.; SOUZA, T. F. M. **Monofilamento: Conhecimento sobre sua Utilização**. Revista Estima. Salvador – BA: 2017. V.15, n.2, Abr-Jun (2017). Disponível em: <https://doi.org/10.5327/Z1806-3144201700020003>. Acesso em: 28. ago. 2020.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019-2020** Disponível em: <https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-2020.pdf> . Acesso em: 28 ago. 2020.
5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013/2014**. Disponível em: <https://www.diabetes.org.br/publico/images/pdf/diretrizes-sbd.pdf>. Acesso em: 28. ago. 2020.
6. Rached, A. C. L. T. **Baropodometria na Hanseníase e sua Relação com Alterações de Sensibilidade**. Dissertação Mestrado Programa de Pós-Graduação e Área de Concentração Interunidades em Bioengenharia. Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2010. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-20072012-163244/publico/TDE_ThaniaLoiolaCordeiroAbiRached.pdf. Acesso: 23/09/2020.

Elaborado por: Marisandra Borges Ribeiro Seyboth	Revisado por: Viviane Karina Korovsky Renata Andrade Teixeira Heil Fernanda Cristina Spiller	Aprovado por: Marisandra Borges Ribeiro Seyboth
Acesso:	Disponível pelo Endereço Eletrônico:	
Sistema de Informação SES/Joinville – INTRANET	Pub. Documentos / Coordenação de enfermagem / Procedimentos Operacionais Padrão	
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI 20.0.140358-0	

Alteração após Revisão			
Nº	Data	Responsável	Alteração